



PLIKO



Sillita de ruedas ligera, plegable y fácilmente maniobrable, ideal para traslados rápidos, garantiza un buen nivel de sujeción y confort.





PLIKO

Pliko, un sistema para uso diario

Un moderno diseño combinado con un sencillo sistema de plegado, además de su ligereza, su facilidad de manejo y el confort del asiento para el niño, hacen de Pliko el mejor dispositivo para viajes cortos por el exterior.

Fácil y seguro

Disponibile en diferentes colores con un suave acolchado y cinturones torácicos y soporte pélvico para proporcionar al niño comodidad y seguridad. Pliko permite la instalación de una capota, una capa para lluvia o un saco térmico para proteger al niño.

Plegado en un instante

El respaldo es reclinable hasta una posición que permite al niño dormir cuando lo necesite. Ligero y de fácil manejo para el uso diario, su práctico sistema de plegado hace que pueda plegarse con sólo unos movimientos.



Características

PLIKO es un chasis buggy fácilmente plegable y fabricado en aluminio. Ideal para desplazamientos rápidos, que le permiten ir a cualquier sitio con el niño confortablemente sentado en un soporte de sedestación de manejo extremadamente sencillo.

Este producto presenta un diseño muy elegante, moderno y práctico con nuevos colores: azul/negro, naranja/negro y verde/marrón. Es ligero y fácilmente manejable, para ser usado a diario: su práctico sistema de plegado le permite plegarse con sólo unos movimientos: para poder subir a un autobús o, lo que es más común, trasladarlo a un coche.

Pliko nos proporciona todas las soluciones necesarias para personalizar el posicionamiento del niño: su acolchado especial permite la instalación de cojines y cuñas de posicionamiento en aquellos lugares donde el niño necesite sujeción o apoyo. Sus prácticos cinturones garantizan la seguridad y la sujeción del niño a nivel torácico y a la altura de la pelvis.

El respaldo puede reclinarse hasta una posición de colocación; el reposacabezas puede fijarse a diferentes alturas utilizando un sistema de fijaciones con Velcro. La profundidad del asiento es ajustable y la altura y la flexión-extensión de los reposapiés también son ajustables individualmente.

Las ruedas delanteras pivotantes pueden bloquearse para que no cambien de dirección, evitando así las vibraciones que se producen en terrenos rugosos e irregulares, las ruedas traseras están equipadas con frenos independientes.

La altura de las asas de empuje puede adaptarse a las necesidades del cuidador.



PLIKO DETALLES

Pliko se distribuye con capota para protección contra la lluvia, ésta es muy fácil de instalar, incluso con el niño sentado.



La especial estructura del chasis permite reclinar el respaldo en diferentes posiciones, hasta llegar a la posición horizontal.



... su práctico sistema de plegado nos permite plegarlo en un instante, para subir al autobús, o para traslados en coche.





PLIKO ACESORIOS

CAPELINA PARA LLUVIA DE BOLSILLO
Código 421001 TALLA PEQUEÑA
Código 421002 TALLA MEDIANA
Código 421003 TALLA GRANDE
Capa para lluvia con mangas.




SACO TÉRMICO PARA INVIERNO
Código 872008 Talla pequeña
Código 872108 Talla mediana
Código 872208 Talla grande
TRES TALLAS
(en esta foto en Buggy Pliko)



CUBIERTA
Código 872005
Equipada con protección para la lluvia, con cubierta desmontable.



PLIKO: TABLA DE MEDIDAS

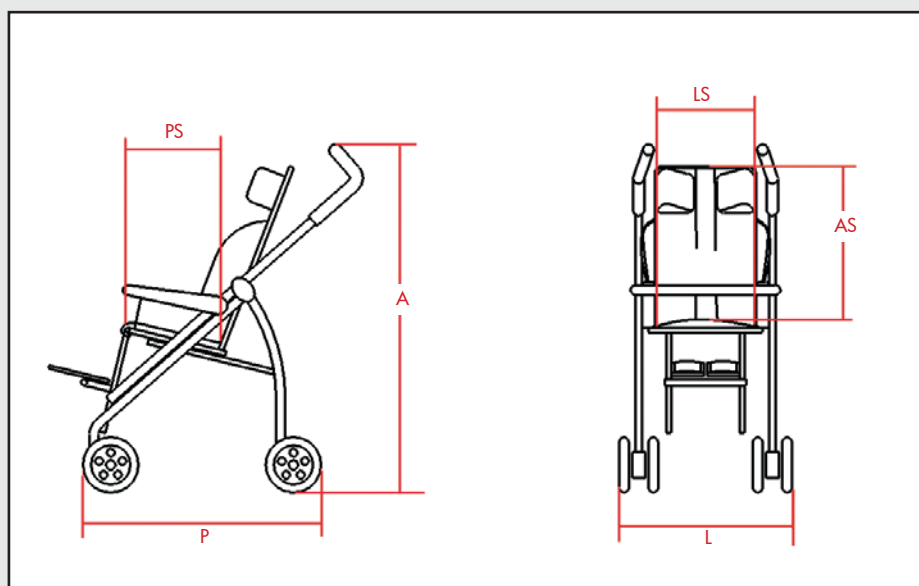

REFERENCIAS	Unit	SIZE 1
Código		872000
Edad/altura del niño		2÷9 years/133 cm
Anchura	Cm	42
PS Profundidad del asiento	Cm	24-30
LS Anchura del asiento	Cm	25 ÷ 34
AS Altura del respaldo	Cm	63
Anchura del respaldo	Cm	34
Longitud del reposapiés	Cm	6 ÷ 30
L Anchura máxima	Cm	54
P Profundidad	Cm	99
A Altura	Cm	102
Inclinación	°	80°
Dimensiones plegdo (anchura x altura x longitud)	Cm	36x41x119
Carga máxima	Kg	25 (+5 basket)
Peso de los dispositivos de ayuda	Kg	10

Colores disponibles



Naranja

Código 872000H



Azul

Código 872000A



OBJETIVOS

Pliko es una silla capaz de satisfacer las necesidades de un buen posicionamiento de niños con discapacidades durante viajes cortos o en situaciones donde la facilidad de uso es vital para la madre (como, por ejemplo, plegar la silla de ruedas e introducirla en el maletero de un coche pequeño). Parece una silla "tradicional", pero las soluciones técnicas han sido estudiadas para garantizar el óptimo posicionamiento de los niños con discapacidad. La superficie de asiento, por ejemplo, se ha inclinado hacia arriba para tratar de "cerrar" el ángulo de la cadera y el fémur, limitando así, tanto el riesgo de deslizamiento de la pelvis hacia delante, basándonos en las condiciones patológicas que tienden a desestabilizar el equilibrio postural de la pelvis y, por tanto, de todo el cuerpo. Por otra parte, hay bandas de

superficie de asiento, por ejemplo, se ha inclinado hacia arriba para tratar de "cerrar" el ángulo de la cadera y el fémur, limitando así, tanto el riesgo de deslizamiento de la pelvis hacia delante, basándonos en las condiciones patológicas que tienden a desestabilizar el equilibrio postural de la pelvis y, por tanto, de todo el cuerpo. Por otra parte, hay bandas de Velcro situadas debajo de las partes acolchadas que, dependiendo de cómo las tensemos, permiten obtener un alojamiento adecuado para la pelvis. Los paneles laterales ajustables proporcionan buena sujeción a nivel pélvico; el cojín del reposacabezas, de altura ajustable, nos proporciona un excelente apoyo para la cabeza del niño y el respaldo reclinable nos permite colocar el asiento en diferentes posiciones proporcionando al niño la posibilidad de descansar.